

CURAPROX

SEKUNDÄRE PROPHYLAXE BEI PARODONTITIS

SWISS PREMIUM 
ORAL CARE





curaden

better health for you

Geben Sie uns Feedback
professional@curaprox.com

Über CURAPROX

CURAPROX ist die Mundgesundheitsmarke der CURADEN AG mit Sitz in der Schweiz. Seit 1972 entwickelt CURAPROX in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Forschung, Lehre und Praxis Instrumente zur Mundhygiene, die möglichst wirksam, schonend und akzeptiert sind.

www.curaprox.com

 www.facebook.com/Curaprox

 www.instagram.com/Curaprox

INHALT

Vorwort Dr. med. dent. Sohar Flisfisch, M.A.	5
Vorwort Christine Breitschmid	7
Parodontitis-Prävalenz	8
Schlussfolgerungen	9
Weiter so – mit Interdentalbürsten	10
Die richtige Grösse	11
In Ihrer Praxis	12
Messen ist entscheidend	14
CPS perio, die Anwendung	15
Die Gängigkeit	16
Spezialfall: direkt nach Parodontalbehandlungen	18
Unterstützende Massnahmen	19
Die Produkte	20
CPS perio	20
CPS soft implant	22
CPS prime	24
Übersicht	26
Better health for you	27



INDIVIDUALPROPHYLAXE GILT AUCH FÜR DIE ZWISCHENRAUMPFLEGE

Genau so, wie jeder Patient unterschiedlich ist, sind auch die anatomischen Nischen in der Mundhöhle verschieden. Die Frage nach der optimalen Zwischenraumhygiene stellt nicht selten eine besondere Herausforderung dar.

Mit den CURAPROX-Interdentalbürsten haben wir ein evidenzbasiertes* Hilfsmittel zur Individualprophylaxe der Zahnzwischenräume.

Mit der zusätzlichen Linie CPS perio wird dem Reinigen grösserer Interdentalräume durch höhere Stabilität bei gleichzeitig feinen Filamenten ebenfalls Rechnung getragen.

So sind die Interdentalbürsten CPS perio sowohl für Parodontitispatienten als auch für Patienten mit primär grösseren Zahnzwischenräumen sehr gut geeignet.

Dr. med. dent. Sohar Flisfisch, M.A.
Zahnarzt aus Basel

*Efficacy of inter-dental mechanical plaque control in managing gingivitis a meta-review (Sälzer et. al., 2015)



**Sie als Zahnärztin, als Zahnarzt wissen,
wie wichtig sekundäre Prophylaxe bei
Parodontitis ist**

In Zusammenarbeit mit Dentalfachleuten haben wir die CPS perio entwickelt: die Interdentalbürste, extra für Zwischenräume mit Perio-Status.

Warum eine besondere Interdentalbürste bei Parodontitis? Nun, die Zwischenräume sind grösser, viele sogar schmerzempfindlich. Und unsere Interdentalbürsten zur Primärprophylaxe, die CPS prime, sind zu weich und haben zu kurze Borsten für die sekundäre Prophylaxe.

Die Interdentalbürsten CPS perio hingegen haben neben genügend langen Borsten die richtige Mischung von Härte und Weichheit. Die CPS Perio sind noch nicht so lange auf dem Markt, umso mehr freut uns das durchweg positive Feedback von Dentalfachleuten und Patienten. Wir haben uns für vier Grössen entschieden; damit sollten Sie etwa 95 Prozent Ihrer Fälle abdecken können.

Christine Breitschmid
Verkaufsleiterin CURAPROX Schweiz

PRÄVALENZ VON PARODONTITIS


Dramatisch war das Fazit der vierten Deutschen Mundgesundheitsstudie von 2006: Parodontitis im Vormarsch.

Die fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie 2016 gibt zehn Jahre später etwas Grund zur Freude. So haben sich Fälle schwerer Parodontitis bei Erwachsenen im Alter von 35 bis 44 halbiert.

Auch insgesamt gebe es weniger Parodontitis. Dennoch gehen die Autoren davon aus, dass der Behandlungsbedarf steigt, so aus demographischen Gründen, zum Beispiel, weil die Menschen immer älter werden.

DMS V – Parodontalerkrankungen bei jüngeren Erwachsenen (35 bis 44 Jahre)

(in Klammern die Resultate der DMS IV von 2005)

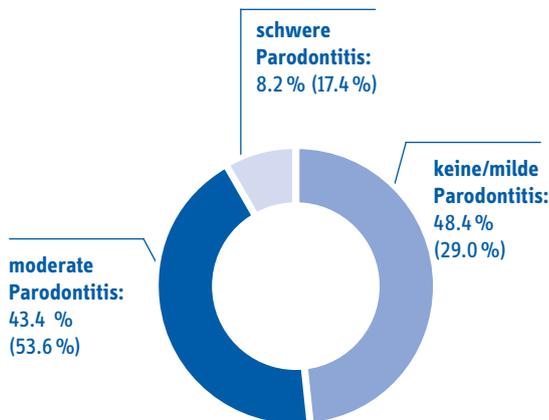

Quelle
DMS V, die Kurzfassung
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf

Schlussfolgerungen

Zwar sind die Zahlen klar besser. Doch der Anstieg in der Kategorie «keine / milde Parodontitis» von 29 Prozent auf 48.4 Prozent zeigt auch: Es gibt eine Vielzahl an Personen, die es in dieser Gruppe zu halten gilt.


«Motivation» lautet das Schlüsselwort dazu. Neben regelmässigen Kontrollen und professionellen Zahnreinigungen (PRZ) spielen die Hilfsmittel eine entscheidende Rolle, die die Patientinnen und Patienten zu Hause benutzen.

Sind diese Hilfsmittel einfach und angenehm anzuwenden, macht das vieles leichter. **Und sind sie so wirksam wie nur möglich**, führt das zu Erfolgen, die zusätzlich motivieren.

WEITER SO – MIT INTERDENTALBÜRSTEN

Diese Erfolge, dargestellt in der DMS V, sehen wir gern. Wir sind nämlich überzeugt, dass es einen Zusammenhang mit der Anwendung von Interdentalbürsten gibt: In den letzten Jahren ist der Absatz stark gestiegen.

Begründetermassen: Interdentalbürsten bieten klare Vorteile. Zahnseide nämlich spannt sich wirkungslos über Einziehungen, insbesondere über die kritischen Stellen am Sulcus. Bei falscher Anwendung kommt es sogar zu Verletzungen, durch die Bakterien in den Blutkreislauf gelangen können.

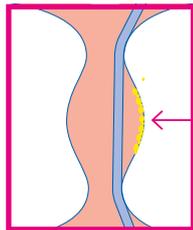


Unwirksam
Die kritischen Stellen sind für Zahnseide unerreichbar.

©CURAPROX – Jethelange

Lange Borsten mit Spannkraft


Nicht jede Interdentalbürste ist die richtige. Gerade bei Parodontitis sind Interdentalbürsten mit besonders langen, starken Borsten gefragt. So spannen sie sich auch in grösseren Interdentalräumen richtig auf – und reinigen Einziehungen und Sulcus.

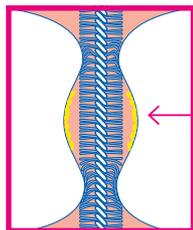

Unwirksam
Interdentalbürsten mit zu kurzen Borsten.

Die richtige Grösse

Eine zu kleine Bürste hat zu kurze Borsten; eine zu grosse kann traumatisch wirken. Es ist deshalb entscheidend, die richtige Grösse zu bestimmen.

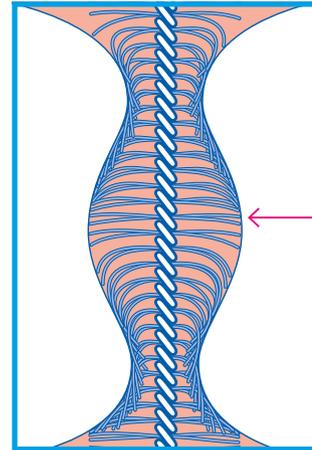

Genau richtig
Die CPS prime füllt den Raum zwischen den Zähnen komplett aus und beseitigt Plaque aus allen kritischen Nischen.

©CURAPROX – Jethelange

Gesunde Interdentalräume

Interdentalbürsten gibt es auch für gesunde Patienten. So sind die besonders feinen CPS prime für geschlossene Interdentalräume entwickelt, also für die Pflege gesunder Papillen; sie eignen sich zur Primärprophylaxe bereits für junge Patienten.

Ausnahmen


Für die Frontzähne ist Zahnseide zu empfehlen, falls auch die kleinste Interdentalbürste nicht passt: die CPS 06 prime.

IN IHRER PRAXIS

So gehen Sie vor, um Ihren Perio-Patientinnen und -Patienten die Zwischenzahnreinigung nahe zu bringen:

1. Messen Sie mithilfe der IAP-Perio-Sonde, welche der vier Grössen der CPS perio für welchen Approximalraum zu verwenden ist.
2. Zeigen Sie gleich am Stuhl, welcher Approximalraum mit welcher Grösse CPS perio gereinigt werden soll.
3. Manchmal passt auch eine Grösse der CPS prime.
4. Führen Sie vor, wie die CPS perio anzuwenden ist.
5. Empfehlen Sie ggf. Zahnseide für die Frontzähne.

TIPP: Nutzen Sie die Interdental Access Chart IAC. Tragen Sie die Grössen der CPS perio in die IAC ein. So wissen Ihre Patienten, welche Interdentalbürste in welchem Zwischenraum verwendet werden soll.

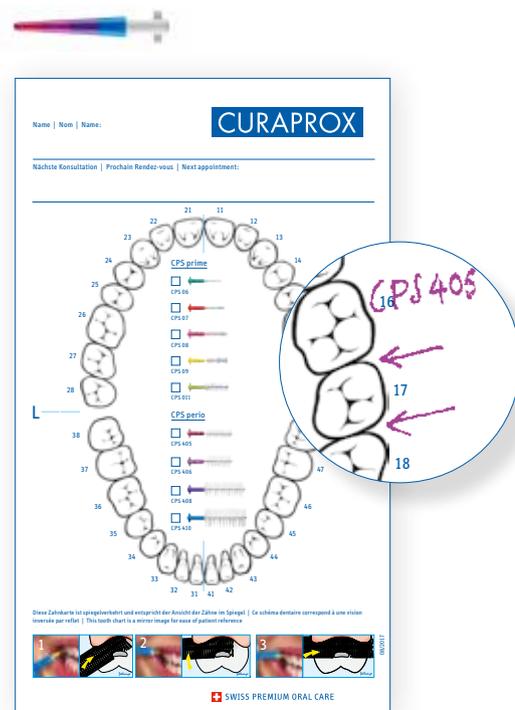

Ideal zur Patienten-Instruktion: die IAC (Interdental Access Chart)


Denken Sie daran

Entscheidend für Ihren Behandlungserfolg ist das, was Ihre Patienten zu Hause tun. Wie sie sich um ihre Mundgesundheit kümmern, wie gut sie reinigen. Eine gute Instruktion ist die Basis für Motivation und Erfolg.


MESSEN IST ENTSCHEIDEND

Einfach, schnell und sicher: Die Farbcodierung der patentierten IAP-Sonden sagt Ihnen, welche CPS perio in welche Zwischenräume passt. So messen Sie die Grössen der Interdentalräume:

1. IAP-Sonde in den Halter klicken.
2. Vorsichtig zwischen die Zähne stossen, bis die Sonde nicht mehr weitergeht.
3. Die Farbe, die zwischen den Zähnen gerade noch sichtbar ist, zeigt die Farbe der CPS perio, die zwischen diese Zähne passt und raumfüllend reinigt.

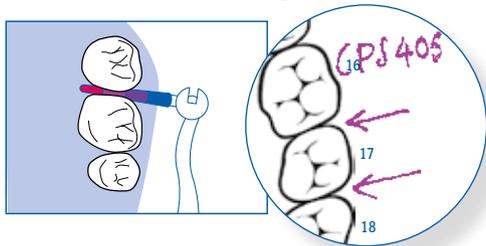


4. Tragen Sie das Messresultat in die Chart IAC ein, damit Ihre Patienten auch zu Hause genau wissen, wo sie mit welcher CPS perio reinigen.

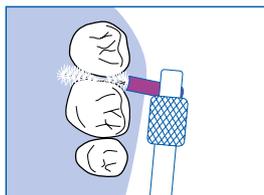


CPS PERIO, DIE ANWENDUNG

Eins, zwei, fertig: Die Anwendung der CPS perio ist einfach und motivierend.


1. Ansetzen: Die CPS perio am Approximalraum ansetzen, senkrecht zur Zahnachse.

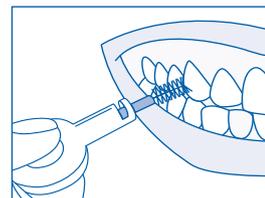

2. Rein und raus: Die Bürste sorgfältig durchschieben und wieder herausziehen, fertig.

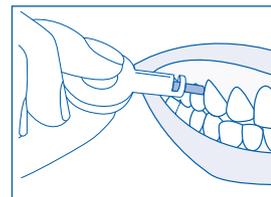

DIE GÄNGIGKEIT

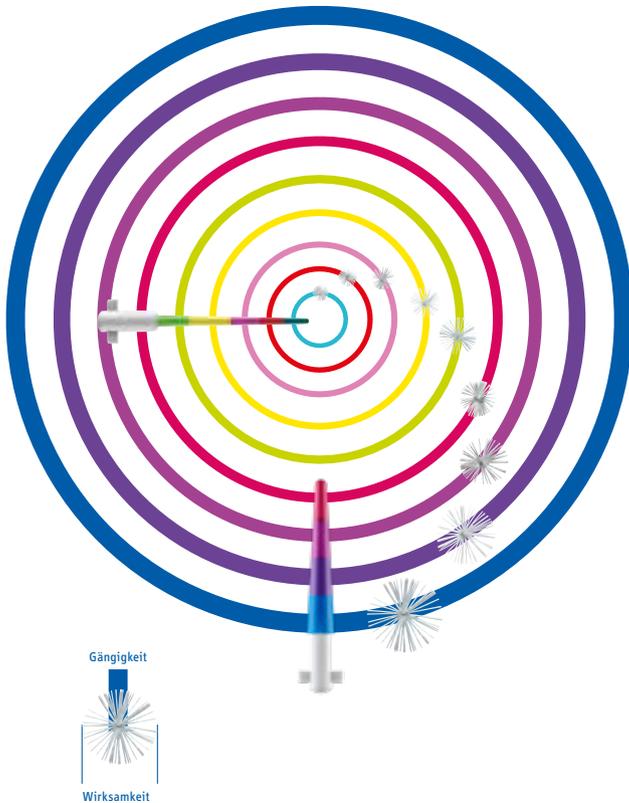

Gängigkeit und Wirksamkeit

Wie gross sollte die Öffnung zwischen den Zähnen mindestens sein, sodass sie von einer Interdentalbürste verletzungsfrei passiert wird? Die Gängigkeit einer Interdentalbürste zeigt den Durchmesser, in Millimetern. Ebenfalls in Millimetern ist die Wirksamkeit der Interdentalbürsten angezeigt: So weit spannen sich die Borsten.

Interdentalbürsten von CURAPROX erreichen bei minimaler Gängigkeit maximale Wirksamkeit. So eignet sich das kleinste Bürstchen, die CPS 06 prime, ab einer Gängigkeit von 0.6 mm – und reinigt in einem Umfeld von bis zu 2.2 mm.

Bitte beachten Sie

Bei der Qualität der CPS-Interdentalbürsten reicht eine einzige Putzbewegung: rein, raus, fertig. Einmal täglich reicht.

Nicht mit Gewalt zwischen die Zähne führen. Bei unsachgemässer Anwendung kann das Zahnfleisch geschädigt werden.

Diese Anleitung gibt es auch online für Ihre Patientinnen und Patienten:

www.curaprox.com/ch-de/cps-anleitung

SPEZIALFALL: DIREKT NACH PARODONTAL-BEHANDLUNGEN

Nach operativen Parodontalbehandlungen wie auch nach dem Einsetzen von Implantaten sind die Zwischenräume besonders gross. Sie benötigen die CPS soft implant, sie hat besonders lange Borsten und ist extra weich, sodass das Gewebe trotz Reinigung verheilen kann. So gehen Sie vor:

1. Probieren Sie empirisch, welches die richtige Grösse CPS soft implant ist; starten Sie mit der kleinsten.
2. Zeigen Sie gleich am Stuhl, welcher Zahnzwischenraum mit welcher CPS soft implant gereinigt werden soll.
3. Führen Sie vor, wie reinigen: ansetzen, rein, raus, fertig. Siehe vorhergehende Seite.
4. Übrigens: Für die Reinigung unter Brücken und Stegen ist ebenfalls eine der CPS soft implant empfehlenswert.

UNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN

Klar, zwei bis vier Kontrolltermine pro Jahr mit professioneller Zahnreinigung. Und vielleicht das:



Zähneputzen nach Operationen:

CS surgical mega soft entwickelt in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. med. dent. N. P. Lang, Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern. Ultrafein dank 12'000 CUREN®-Filamenten à 0,06 mm Durchmesser

Die Schallzahnbürste Hydrosonic Pro

reinigt mit bis zu 42'000 Bewegungen pro Minute bis in die Approximalräume hinein. Die Bürstenköpfe sind entwickelt mit Prof. Dr. Ulrich P. Saxer und Jiri Sedelmayer und sorgen für eine besonders effiziente und einfache Reinigung.



Für ambitionierte Putzer

Die CS 1006 single hält den Sulcus perfekt sauber und schont das Zahnfleisch.

Perfekter Putzwinkel

Dank Doppelknick reinigt die Implant- und Ortho CS 708 auch schwer erreichbare Stellen ganz einfach. Mit super kompaktem Siebenbüschelkopf.

Anleitung:

www.curaprox.com/ch-de/cs-single-die-solotechnik



CPS PERIO – FÜR OFFENE INTERDENTLRÄUME

Zur sekundären Prophylaxe bei Perio-Status: bei offenen Interdentalräumen, Black holes. Auch bei Füllungen, Kronen, Brücken und besonders hartnäckiger Plaque.

- Sehr fest, ganz sanft
- Besonders hohe Reinigungsleistung
- Verursachen keine Schmerzen
- Extra spannkraftige Borsten, dennoch sanft
- Starker Drahtkern, lange Lebensdauer
- System mit vier Grössen, IAP-Sonde, Chart IAC, Farbcodierung

CPS 405 perio

1.3 mm* / 5.0 mm**



CPS 408 perio

2.2 mm* / 8.0 mm**



CPS 406 perio

1.7 mm* / 6.5 mm**



CPS 410 perio

2.5 mm* / 10.0 mm**



Für die Praxis

Chairside Box CPS Perio



125× Interdentalbürsten CPS perio in 4 Grössen:

- 50× CPS perio 405
- 25× CPS perio 406
- 25× CPS perio 408
- 25× CPS perio 410
- montiert auf UHS 409 Halter
- Refill-Packungen à 25 Stück erhältlich.
- inkl. 24× IAP perio Sonden zur Vermessung der Interdentalräumen, autoklavierbar

Für Patienten

CPS perio plus: 5 CPS perio
inkl. Halter UHS 451



CPS SOFT IMPLANT – BEI GROSSEN ZWISCHENRÄUMEN NACH PARODONTAL-BEHANDLUNGEN UND DEM SETZEN VON IMPLANTATEN

Die CPS soft implant verfügen über einen einzigartigen Borstendurchmesser, was die Reinigung nach Eingriffen sehr sicher und wirksam macht. Die Borsten sind weich und abgerundet.

- System mit fünf Grössen
- Extra lange Borsten, extra sanft und extra abgerundet
- Hilfreich auch bei Brücken für die Reinigung unter den Stegen
- Starker Drahtkern, lange Lebensdauer
- Plastiküberzug schützt Implantat-Oberflächen
- Ökologisches Click-System für alle Halter

CPS 505 soft implant

>2.0 mm* / 5.5 mm**



CPS 512 soft implant

>2.0 mm* / 12.0 mm**



CPS 507 soft implant

>2.0 mm* / 7.5 mm**



CPS 516 soft implant

>2.0 mm* / 16.0 mm**



CPS 508 soft implant

>2.0 mm* / 4.5-8.5 mm**



Gängigkeit



Wirksamkeit

* Gängigkeit
** Wirksamkeit

Für die Praxis

Chairside Box CPS soft implant



125× Interdentärbürsten

CPS soft implant in 5 Grössen:

- 25 × CPS soft implant 505
- 25 × CPS soft implant 507
- 25 × CPS soft implant 508
- 25 × CPS soft implant 512
- 25 × CPS soft implant 516
- montiert auf UHS 409 Halter
- Refill-Packungen à 25 Stück erhältlich

Für Patienten

CPS soft implant:

Fünf CPS soft implant ohne Halter.



CPS PRIME – FÜR GESCHLOSSENE INTERDENTLRÄUME

Ideal zur Primärprophylaxe: Die CPS prime sind die wohl feinsten Bürstchen auf dem Markt: Dank kleinster Gängigkeit und längsten Borsten sind die CPS prime sogar für kleinste Interdentalräume perfekt.

- Primärprophylaxe
- Ultrafeine lange Borsten mit Spannkraft
- CURAL®-Draht, extra dünn, extra stark, hohe Lebensdauer
- System mit fünf Grössen, IAP-Sonde, Chart IAC, Farbcodierung

CPS 06 prime

0.6 mm* / 2.2 mm**



CPS 07 prime

0.7 mm* / 2.5 mm**



CPS 08 prime

0.8 mm* / 3.2 mm**




CPS 09 prime

0.9 mm* / 4.0 mm**



CPS 011 prime

1.1 mm* / 5.0 mm**

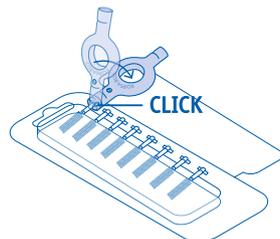

Für die Praxis

Chairside Box CPS Prime



125× Interdentalbürsten CPS prime in 5 Grössen:

- 25 × CPS prime 06
- 25 × CPS prime 07
- 25 × CPS prime 08
- 25 × CPS prime 09
- 25 × CPS prime 011
- montiert auf UHS 409 Halter
- inkl. 24 × IAP-Sonden zur Vermessung der Interdentalräume, autoklavierbar
- inkl. Flyer zur Patienten-Instruktion
- Refill-Packungen à 25 Stück erhältlich

Für Patienten:

- CPS prime plus:
Fünf CPS prime inkl. Halter UHS 451
- CPS prime plus handy:
Fünf CPS prime inkl. Halter UHS 409

Superpraktisch:

- Refill-Packungen à 12 Stück erhältlich



ÜBERSICHT CPS

CURADEN – BETTER HEALTH FOR YOU

Bei gesunden Interdentalräumen: CPS prime



Für Patienten mit Perio-Status: CPS perio



Bei Implantaten, Brücken und Stegen: CPS soft implant



Die Farben sind lichtdurchlässig.

«Was ist überhaupt der Job des Zahnarztes?»
Die Antwort der CURADEN AG: Dentalmediziner sind Präventivmediziner, sie verhelfen zu einer besseren Gesundheit. Die nämlich beginnt im Mund.

Gesunder Mund, ein Leben lang. Das ist das Ziel. Die CURADEN AG hilft Dentalmedizinern, es zu erreichen. Für ihre Patienten und für sich. – Better health for you.

Die CURADEN AG ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Sitz in Kriens bei Luzern.

Alle CURAPROX-Produkte sind in der Schweiz erfunden und entwickelt. Erhältlich sind sie in Zahnarzt- und Dentalhygienepraxen, Apotheken und Drogerien sowie im Onlineshop auf www.curaprox.com.

CURAPROX

Weitere Details zu den Produkten und
Anwendungsfilme finden Sie auf



www.curaprox.com

curaden

better health for you

CURADEN AG
Amlehnstrasse 22
CH-6010 Kriens
T +41 (0)41 319 45 50
F +41 (0)41 319 45 90
info@curaden.ch

